

Seturi Chirurgicale și Instrumente

Fabricăm instrumente chirurgicale inovatoare
pentru a îmbunătăți practica zilnică a clinicienilor.



Made in Italy

Seturi chirurgicale:

• Seturi Standard

JD Surgical Kit	06
JDPad Surgical Kit	10
JD Bone Track Drills Kit	14
JD Onedrill Kit	16

• Seturi pentru Chirurgie Ghidată

JD Guided Surgery Kit	18
JD Extra Drills Kit	22

• Seturi Maxilla-For-All

JD Pterygo Surgical Kit	24
JDPterygo Drills Kit	26
JDNasal Kit	27
JDZygoma Kit	28

Surgical Instruments:

JDGuide	34
JDTorque	36
Bone Mill	37
Tissue Punch	37
Surgical Drivers	38
Direction Indicators	38
Aligning Instruments	39
Depth Probes	39
JD Removal and Repair Tools	40
JDWeld	42

Protocoale de găurire:

Chirurgie fără ghidaj	46
Chirurgie ghidată	54

Tabele sumare:

Toate Burghiile	60
Toate Instrumentele	64

KITURI CHIRURGICALE

Kituri Standard

JD Surgical Kit	06
JDPad Surgical Kit	10
JD Bone Track Drills Kit	14
JD Onedrill Kit	16

Kituri pentru Chirurgie Ghidată

JD Guided Surgery Kit	18
JD Extra Drills Kit	22

Kituri pentru Maxilar

JD Pterygo Surgical Kit	24
JDPterygo Drills Kit	26
JDNasal Kit	27
JDZygoma Kit	28

KIT CHIRURGICAL JD

Cod Produs: JDPN

Compact și Ușor de Folosit

Kitul Chirurgical JD este un kit compact și ușor de utilizat, care poate fi sterilizat și rezistă la cicluri de autoclavare.

Kitul este disponibil în versiuni cu și fără opritori.

Alegeți kitul care se potrivește cel mai bine intervenției dumneavoastră chirurgicale.





Kit Chirurgical JD
Kit Standard din Plastic
Cod: JDPS

Burghie:

JDPD	Precision Drill
JDDR20	Twist Drill Ø 2.0
JDDR24	Twist Drill Ø 2.4
JDDR28	Twist Drill Ø 2.8
JDDR32	Twist Drill Ø 3.2
JDDR36	Twist Drill Ø 3.6
JDDR40	Twist Drill Ø 4.0
JDDR44	Twist Drill Ø 4.4
JDDR48*	Twist Drill Ø 4.8
JDDREXT	Drill Extension

*De comandat separat



Șurubelnițe pentru implanturi și proteze:

JDTW	Torque Wrench JDTorque
JDTWA	Surgical Adapter for JDTorque

Notă: Vor fi furnizate șurubelnițe protetice Noetell compatibile cu implantul ales.



Indicatori de direcție:

JDDI	Direction Indicator
JDDIS	Direction Indicator Short



JD SURGICAL KIT

Cod Produs: JDPS - JDPCN



Kit chirurgical JD cu opritoare de burghiu
Cutie de plastic cu opritoare de burghiu
Codul produsului: JDPCN

Acest kit conține aceleași produse ca și kitul de bază JD Surgical, cu excepția burghiilor care sunt înlocuite cu unele cu opritoare. Opritoarele sunt adăugate.

Burghie:

JDDR20C	Twist Drill with Stop Ø 2.0
JDDR24C	Twist Drill with Stop Ø 2.4
JDDR28C	Twist Drill with Stop Ø 2.8
JDDR32C	Twist Drill with Stop Ø 3.2
JDDR36C	Twist Drill with Stop Ø 3.6
JDDR40C	Twist Drill with Stop Ø 4.0
JDDR44C	Twist Drill with Stop Ø 4.4
JDDR48C*	Twist Drill with Stop Ø 4.8

*De comandat separat



Opritoare de burghiu:

JDDRST60N	Drill Stop New L 6
JDDRST80N	Drill Stop New L 8
JDDRST100N	Drill Stop New L 10
JDDRST115N	Drill Stop New L 11.5
JDDRST130N	Drill Stop New L 13
JDDRST150N	Drill Stop New L 15



Burghie;

În prima linie a Kitului Chirurgical JD sunt localizate burghiile cu opritoare și extensia pentru burghiu, utilizată pentru implantul dentar. Se recomandă respectarea mărcilor de adâncime, iar în special pentru implanturi mai mari de la 10 mm la 115 mm. Este indicat să urmați indicațiile de foraj pentru fiecare dimensiune specificată, disponibile pe site-ul www.jdentalcare.com.

Burghiile inserate în seturile chirurgicale sunt de asemenea caracterizate printr-un strat DLC, care are următoarele avantaje:

- Atunci când burghiile sunt utilizate la viteze mari, stratul DLC reduce semnificativ fricțiunea și coroziunea, făcându-le mai ușor de utilizat practic.
- Stratul DLC oferă o reducere semnificativă a rezistenței, rezultând într-o încălzire minimă a osului.

Pașii pentru o osteotomie corectă:

1. Alegeți lungimea corectă a implantului.
2. Analizați tipul de os: dacă este moale, mediu sau dens.
3. Urmăriți indicația de foraj corespunzătoare tipului de os și implant ales.
4. Verificați lungimea osului din dreapta-mijlociu a mandibulei chirurgicale.

Notă: Notă: Pentru a plasa implantul JD Implant o6.60, este necesar să cumpărați separat burghiul potrivit de 4.8; nu este prezent în seturile standard de kituri.

Adaptoare chirurgicale:

Adaptorul chirurgical este folosit cu un aplicator manual pentru inserarea implantului. Când nu este posibil să se obțină stabilitatea implantului în oase moale, se poate folosi adaptorul cu dispozitivul JDTorque pentru a înșuruba implantul la poziția finală.

**Indicatoare de direcție:**

Kitul include două indicatoare de lungime scurtă și una lungă (5mm). Aceste instrumente trebuie folosite după ce toate burghiile cu opritori au fost utilizate și au forat la minimum 2.0 mm sub adâncimea implantului pentru a măsura site-ul implantului.

**Șurubelnițe protetice:**

Seturile chirurgicale JD includ și șurubelnițe pentru protetica dentară, acoperitoare pentru șuruburi și șuruburile. Aceste dispozitive sunt concepute pentru a fi utilizate manual și cu JDTorque pentru a vi le oferi cu șurubelnița protetică potrivită în funcție de implantul ales.

**JDTorque:**

JDTorque este dispozitivul manual de torsionare fabricat de JDentalCare. Permite ajustarea precisă a cuplului de strângere pentru implanturi dentare, bonturi protetice și șuruburi protetice. Valorile de cuplu de strângere variază de la 10 la 80 Ncm.

**Indicatori de direcție:**

Kitul include doi indicatori de direcție, unul scurt de 10 mm lungime și unul lung de 15 mm lungime. Aceste instrumente vor fi utilizate după folosirea burghiului de 2.0 mm. Aceste instrumente au, de asemenea, marcaje pentru a măsura adâncimea locului implantului.

**Opritor pentru burghiu:**

Aceste dispozitive sunt utilizate împreună cu burghiul pentru a limita adâncimea de găurire la o valoare prestabilită, în timpul pregătirii locului implantului.




SET CHIRURGICAL JDPAD

Cod produs: EVPS - EVPCN

Compact și ușor de utilizat

Setul chirurgical JDPAD constă dintr-un corp din silicon și un corp din aluminiu. Acest set poate fi demontat, spălat și sterilizat după utilizare fără probleme. Setul este disponibil în două versiuni, cu și fără opritori de burghiu. Alegeți setul care se potrivește cel mai bine nevoilor chirurgicale.



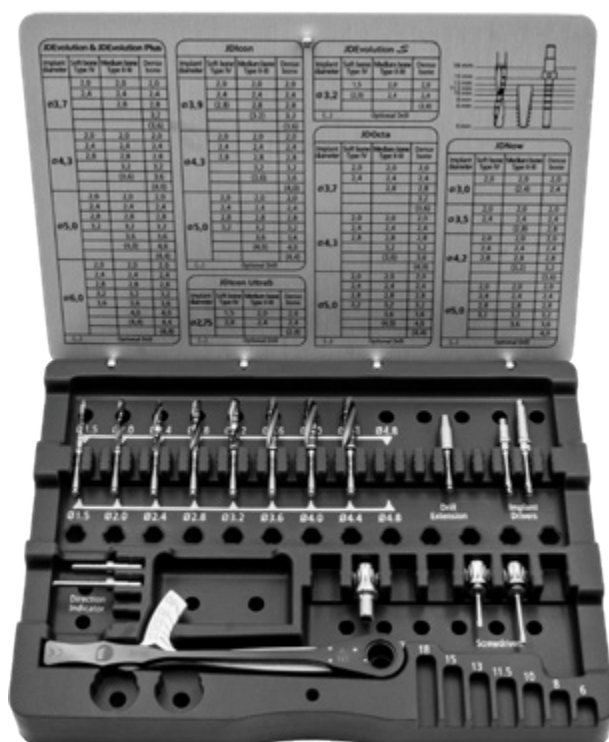

JDPad Surgical Kit
JDPad Standard
Code: EVPS

Burghie:

JDPD	Precision Drill
JDDR20	Twist Drill Ø 2.0
JDDR24	Twist Drill Ø 2.4
JDDR28	Twist Drill Ø 2.8
JDDR32	Twist Drill Ø 3.2
JDDR36	Twist Drill Ø 3.6
JDDR40	Twist Drill Ø 4.0
JDDR44	Twist Drill Ø 4.4
JDDR48*	Twist Drill Ø 4.8
JDDREXT	Drill Extension New

*De comandat separat



Dispozitive pentru implanturi și proteze:

JDTW	Torque Wrench JDTorque
JDTWA	Surgical Adapter for JDTorque

Note: Toate dispozitivele de protezare vor fi compatibile cu implantul ales.




Indicatori de direcție:

JDDI	Direction Indicator
JDDIS	Direction Indicator Short



SET CHIRURGICAL JDPAD

Cod produs: EVPS - EVPCN

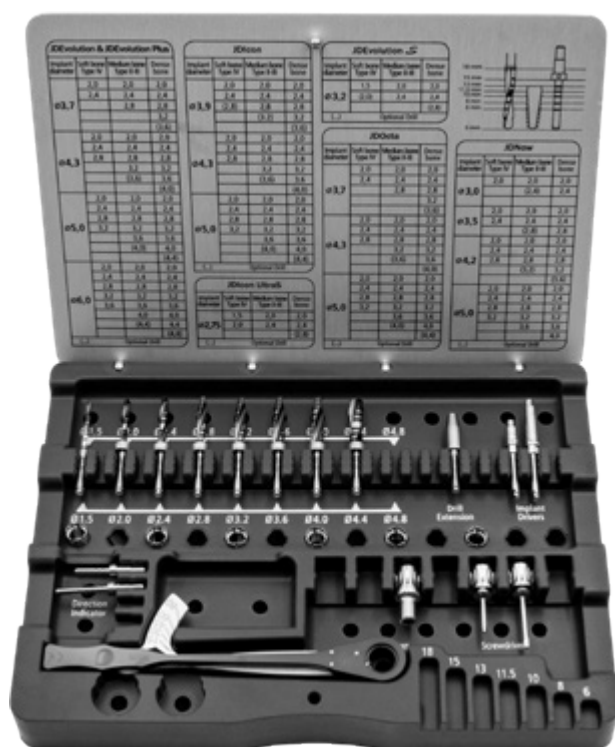

JDPad Surgical Kit w/ Drill Stops

JDPad w/ Drill Stops

Cod: EVPCN

Acest kit conține aceleași produse ca și kitul chirurgical JDPad standard, exceptând burghiile care sunt înlocuite cu cele care au opritori. Opritorii sunt adăugați.

Burghie:

JDDR20C	Twist Drill with Stop Ø 2.0
JDDR24C	Twist Drill with Stop Ø 2.4
JDDR28C	Twist Drill with Stop Ø 2.8
JDDR32C	Twist Drill with Stop Ø 3.2
JDDR36C	Twist Drill with Stop Ø 3.6
JDDR40C	Twist Drill with Stop Ø 4.0
JDDR44C	Twist Drill with Stop Ø 4.4
JDDR48C*	Twist Drill with Stop Ø 4.8

*To be ordered separately

Oprirea burghiilor:

JDDRST60N	Drill Stop New L 6
JDDRST80N	Drill Stop New L 8
JDDRST100N	Drill Stop New L 10
JDDRST115N	Drill Stop New L 11.5
JDDRST130N	Drill Stop New L 13
JDDRST150N	Drill Stop New L 15





Burghie:

În primul rând al Kitului de Burghie Chirurgicale JDP sunt situate burghiile și burghiile de extensie. Utilizate pentru implanturile dentare, au marcaje de adâncime pentru o plasare mai precisă. Stratul DLC de pe burghie reduce semnificativ uzura și acumularea de căldură, asigurând o performanță durabilă și minimizând încălzirea osului.

Burghiile torsionate inserate în kiturile chirurgicale sunt, de asemenea, caracterizate de un strat DLC, care are următoarele avantaje:

- Când burghiile chirurgicale sunt utilizate la viteze mari, stratul DLC face ca marcajele de pe burghiile torsionate să fie vizibile pentru o utilizare practică mai ușoară.
- Stratul DLC are o rezistență excelentă la uzură și coroziune.
- Stratul DLC reduce fricțiunea, rezultând în încălzirea minimă a osului în timpul osteotomiei implantului.

Pașii corecți pentru osteotomie:

1. Alegeți lungimea corectă a implantului.
2. Analizați tipul osului: dacă este moale, mediu sau dens.
3. Urmăți indicațiile de forare specificate, conform tipului de os și implant ales.
4. Verificați lungimea burghiilor torsionate în partea dreaptă jos a trusei chirurgicale.

Note: Pentru a plasa Implantul JD Ø6.0, este necesar să cumpărați separat trusa chirurgicală adecvată cu diametrul Ø4.8 care nu este prezent în kiturile standard.

Implant drivers:

Pe partea stângă a Kitului Chirurgical JD sunt incluse două chei pentru implant, una scurtă și una lungă. Acestea vă oferă cheia compatibilă cu driverul conform implantului ales. La momentul final al implantării, este important să simplificați procesul final al proteticului, aliniind hexagonul cheii cu fața vestibulară a implantului. Aceasta permite poziționarea optimală a componentei protetice.



Șurubelnițe protetice:

Kitul Chirurgical JD include, de asemenea, două șurubelnițe pentru șuruburile protetice, capacele șuruburilor și copiile de impresie. Aceste șurubelnițe sunt proiectate pentru a fi utilizate manual și cu cheia de torsiune JD. Vă vom furniza șurubelnița potrivită conform liniei implantului ales.



Adaptor chirurgical:

Adaptorul chirurgical este utilizat cu driverul de implant adecvat pentru a insera manual implantul. Când nu este posibil să inserați manual adaptorul în dispozitivul JD Torque, inserați adaptorul în dispozitiv pentru a înșuruba implantul în poziția finală.



JD Torque:

JD Torque este cheia manuală de torsiune produsă de JDentalCare. Vă permite să inserați manual, să strângeți sau să slăbiți implanturile și șuruburile JDentalCare, atingând un nivel specific de torsiune. Torsiunile de strângere variază de la 10 la 80 Ncm.



Indicatori de direcție:

Kitul include doi indicatori de direcție, unul scurt de 10mm și unul lung de 15mm. Aceste instrumente trebuie utilizate după burghiu de 0,2mm. Aceste instrumente au, de asemenea, măsuri de adâncime pentru a măsura adâncimea site-ului implantului.



Oprire burghiu:

Aceste dispozitive sunt utilizate cu burghiul pentru a limita adâncimea de forare la o valoare predefinită, în timpul pregătirii site-ului implantului.



KIT DE BURGHIU JD BONE TRACK


Cod produs: JDBTK

Burghiul JD Bone Track este un produs înregistrat, special conceput pentru a simplifica inserția implantului post-extracție. Burghiile JD Bone Track sunt caracterizate de o bandă de tăiere diamantată și un vârf necătător. Urmărește metoda Bone Track!



Burghiile JD Bone Track sunt special concepute pentru a simplifica inserția imediată a implantului post-extractiv.

Acestea sunt disponibile în patru diametre diferite pentru implanturi (Ø 3,2, Ø 3,7, Ø 4,3, Ø 5,0 mm).

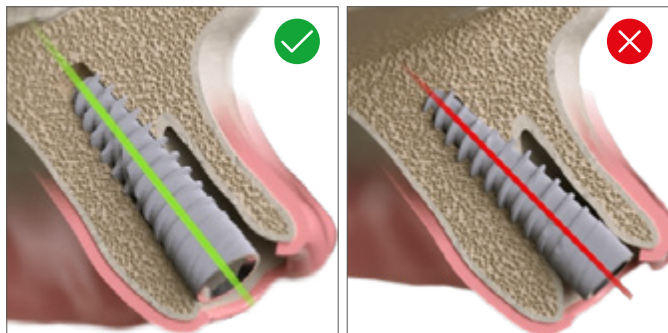

Notă: toate dimensiunile sunt exprimate în milimetri.

Burhii pentru protocol ne-ghidat:

JDDIADR32	Diamond Drill Ø 3.2
JDDIADR37	Diamond Drill Ø 3.7
JDDIADR43	Diamond Drill Ø 4.3
JDDIADR50	Diamond Drill Ø 5.0




Kit JD OneDrill

Cod produs: JDODK

Kitul JD OneDrill este compus din burghie care vă permit să simplificați crearea suprafeței de osteotomie. Utilizați doar o singură burghie (Tip II-IV) sau două burghie secvențiale în caz de os dens (Tip I). Burghiile din kitul JD OneDrill sunt folosite pentru a pregăti osteotomia pentru plasarea implanturilor JDEvolution și JDEvolution.



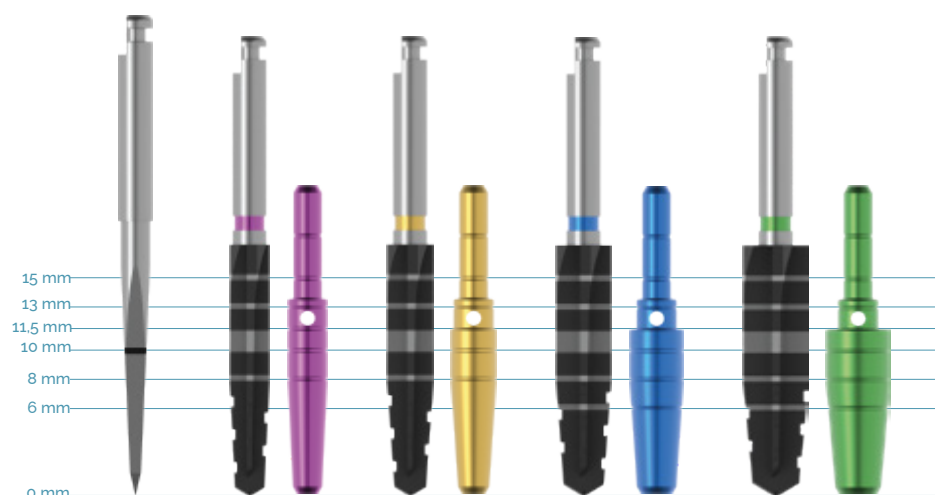

Burghiele din kitul JD OneDrill sunt special concepute cu patru laturi tăietoare diferite. Acestea reduc timpul de găurire și morbiditatea post-operatorie.

Burghiele sunt disponibile pentru diametre de 3.2, 3.7 și 4.3 mm și sunt caracterizate de coduri de culoare diferite.

Burghie pentru protocolul necondus:


JDID	Initial Drill
JDOD32	Implant Drill Ø 3.2
JDOD37	Implant Drill Ø 3.7
JDOD43	Implant Drill Ø 4.3
JDOD50	Implant Drill Ø 5.0
JDDREXT	Drill Extension
JDOD32P	Direction Indicator for JDOD32
JDOD37P	Direction Indicator for JDOD37
JDOD43P	Direction Indicator for JDOD43
JDOD50P	Direction Indicator for JDOD50




KITUL DE CHIRURGIE GHIDATĂ JD

Cod produs:JDGSK

Kitul de Chirurgie Ghidată JD este realizat de JDentalCare pentru a sprijini chirurgia ghidată prin computer. Acest kit este complet, ușor de folosit și prezintă o compatibilitate remarcabilă. Cu ajutorul lui, puteți realiza aliniamente ale implanturilor dentare de la JDentalCare, cu diametre de la 2.75 mm la 5.00 mm și lungimi de la 6 mm la 15 mm. Vei putea de asemenea să cumperi și să completezi kitul cu implanturi de 18, 20, 22, 24, 26 mm lungi, oferite pentru achiziție și incluse în kitul de Chirurgie Ghidată JD Extra Drill (Cod: JDKIT02).

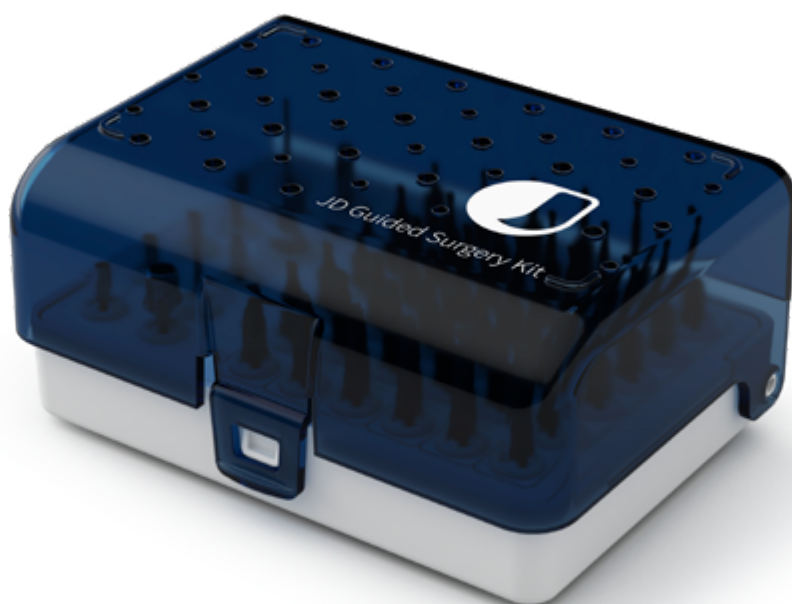

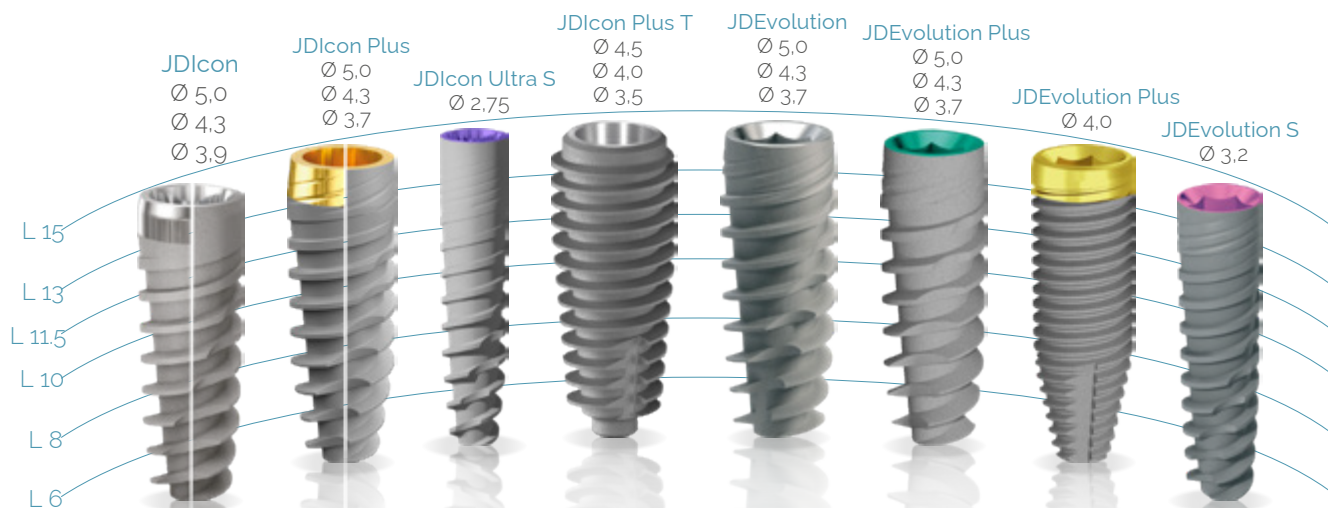

Simplitate

Un singur kit pentru toate liniile de implanturi JD

Insertie simplificată cu un singur kit pentru toate fixturile de implant dentar JDentalCare, cu diametre de la 2.75 mm la 5.00 mm și lungimi de la 6 mm la 15 mm.

Lasați-vă ghidat de kitul de Chirurgie Ghidată JD

Soluția ideală pentru a efectua o chirurgie minim invazivă cu o precizie sporită. Kitul JD Ghidat oferă rezultate predictibile și câțiva pași simpli de chirurgie ghidată. Include mâneci cu design special cu două tăieturi laterale, care permit:

- O frecare mai mică pe mâneci, evitând supraîncălzirea
- O integrare externă mai bună în timpul pregătirii locului implantului



Compatibilitate

Controlul adâncimii implantului ghidat

Precizie chirurgicală ridicată și implanturile sunt plasate conform planificării exacte în procedura chirurgicală ghidată și instrumentele chirurgicale ghidate sunt utilizate în combinație cu o singură mână de 0.50mm pentru un control sigur al adâncimii implantului.



Precizie

Design de software prietenos cu utilizatorul

Un singur kit compatibil cu programele principale de software pentru chirurgie ghidată prezente pe piață.



INNER DIAMETERS:

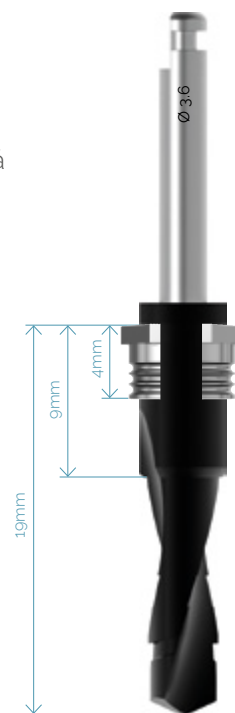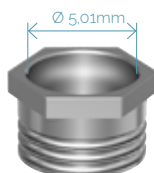

KITUL GHIDAT PENTRU CHIRURGIE JD

Cod produs:JDGSK



Kituri de Chirurgie Ghidată:

EVGMC	Implant Mounter for JDEvolution
EVGMLC	Implant Mounter Long for JDEvolution
ESGMC	Implant Mounter for JDEvolution S
ICGMC	Implant Mounter for JDIcon
ICGMC.	Implant Mounter for JDIcon Plus
ICGMLC.	Implant Mounter Long for JDIcon Plus
ISGMC	Implant Mounter for JDIcon Ultra S

Note: Vom oferi mânerile de implant corespunzătoare liniei de implant alese.



Mânere și șoferi protetici:

EVIDG	Driver Body for Guided Surgery
EVSDP25	Prosthetic Driver L 25
EVSDPF25	Prosthetic Driver for JDTorque L 25
JDID116	Implant Driver for Guided Surgery JDEvolution Plus*
JDID111	Implant Driver for Guided Surgery JDEvolution S*
JDTW	Torque Wrench JDTorque
JDTWA	Surgical Adapter for JDTorque

*Nu este inclus în kit. De comandat separat.



Mâneci și Pin:

JDBG	Template Sleeve for Guided Surgery*
JDBGB	Template Sleeve for Guided Surgery Peek*
JDBGP	Pin Sleeve*
JDPIN	Fixation Pin

*De comandat separat




Burgie:

JDGD20-060	Guided Drill Ø 2.0 L 6.0
JDGD20-080	Guided Drill Ø 2.0 L 8.0
JDGD20-100	Guided Drill Ø 2.0 L 10.0
JDGD20-115	Guided Drill Ø 2.0 L 11.5
JDGD20-130	Guided Drill Ø 2.0 L 13.0
JDGD20-150	Guided Drill Ø 2.0 L 15.0



Ø 2.0

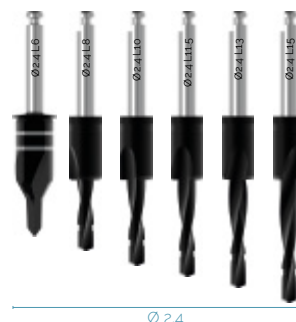

Ø 2.4

JDGD24-060	Guided Drill Ø 2.4 L 6.0
JDGD24-080	Guided Drill Ø 2.4 L 8.0
JDGD24-100	Guided Drill Ø 2.4 L 10.0
JDGD24-115	Guided Drill Ø 2.4 L 11.5
JDGD24-130	Guided Drill Ø 2.4 L 13.0
JDGD24-150	Guided Drill Ø 2.4 L 15.0

JDGD28-060	Guided Drill Ø 2.8 L 6.0
JDGD28-080	Guided Drill Ø 2.8 L 8.0
JDGD28-100	Guided Drill Ø 2.8 L 10.0
JDGD28-115	Guided Drill Ø 2.8 L 11.5
JDGD28-130	Guided Drill Ø 2.8 L 13.0
JDGD28-150	Guided Drill Ø 2.8 L 15.0



Ø 2.8



Ø 3.2

JDGD32-060	Guided Drill Ø 3.2 L 6.0
JDGD32-080	Guided Drill Ø 3.2 L 8.0
JDGD32-100	Guided Drill Ø 3.2 L 10.0
JDGD32-115	Guided Drill Ø 3.2 L 11.5
JDGD32-130	Guided Drill Ø 3.2 L 13.0
JDGD32-150	Guided Drill Ø 3.2 L 15.0

JDGD36-060	Guided Drill Ø 3.6 L 6.0
JDGD36-080	Guided Drill Ø 3.6 L 8.0
JDGD36-100	Guided Drill Ø 3.6 L 10.0
JDGD36-115	Guided Drill Ø 3.6 L 11.5
JDGD36-130	Guided Drill Ø 3.6 L 13.0
JDGD36-150	Guided Drill Ø 3.6 L 15.0



Ø 3.6



Ø 4.2

JDGD42-060	Guided Drill Ø 4.2 L 6.0
JDGD42-080	Guided Drill Ø 4.2 L 8.0
JDGD42-100	Guided Drill Ø 4.2 L 10.0
JDGD42-115	Guided Drill Ø 4.2 L 11.5
JDGD42-130	Guided Drill Ø 4.2 L 13.0
JDGD42-150	Guided Drill Ø 4.2 L 15.0

JDGD P	Guided Surgery Precision Drill
--------	--------------------------------



Punch de țesut:

JDTP35	Tissue Punch Ø 3.5
--------	--------------------



KIT EXTRA BURGHIIURI JD

Cod produs:JDKIT02

Kitul de Chirurgie Ghidată Extra JD este un kit care include burghie care pot fi utilizate cu sistemul JD de implanturi, pentru implementarea tehnicii de chirurgie ghidată.





Burghie:

JDGD20-180	Guided Drill Ø 2.0 L 18.0
JDGD20-200	Guided Drill Ø 2.0 L 20.0
JDGD20-220	Guided Drill Ø 2.0 L 22.0
JDGD20-240	Guided Drill Ø 2.0 L 24.0
JDGD20-260	Guided Drill Ø 2.0 L 26.0
JDGD24-180	Guided Drill Ø 2.4 L 18.0
JDGD24-200	Guided Drill Ø 2.4 L 20.0
JDGD24-220	Guided Drill Ø 2.4 L 22.0
JDGD24-240	Guided Drill Ø 2.4 L 24.0
JDGD24-260	Guided Drill Ø 2.4 L 26.0



KITUL CHIRURGICAL JD PTERYGO

Cod produs: JDKITo4

Kitul Chirurgical JD Pterygo este special dezvoltat de JDentalCare pentru implanturile în osul pterigoid. Este un kit complet ce conține toate instrumentele necesare pentru a plasa cu ușurință conținutul în osul pterigoid și pentru a asigura poziționarea precisă a implanturilor JD Pterygo și JD Pterygo One. Kitul oferă toate instrumentele chirurgicale și protetice compatibile cu implanturile JD Pterygo și JD Pterygo One.





Burghie pentru protocolul fără ghidare:

JDDRPT20	Drill Ø 2.0 JDPterygo
JDDRPT24	Drill Ø 2.4 JDPterygo
JDDR101	Drill Ø 2.8 JDPterygo
JDDRPT32	Drill Ø 3.2 JDPterygo



Drivere de implant și protetice:

JDID100	JD Implant Driver - JDPterygo
EVSDPF60:	Prosthetic Driver for JDTorque L60 JDEvolution Plus JDPterygo
JDID101	JD Implant Driver - JDPterygo One
EVSDPF60	Prosthetic Driver for JDTorque L 60 JDPterygo One



KITURI DE BURGHIE JDPterygo®


Cod produs: JDKIT01

Kitul de Burghie JDPterygo este special conceput pentru inserția de implante în osul pterigoid. Kitul conține burghie JDPterygo pentru o pregătire corectă a oaselor în zonele apicale și coronale. Aceste burghie asigură o osteotomie precisă, sigură și rapidă.



Burghie:

JDDRPT20	Drill Ø 2.0 JDPterygo
JDDRPT24	Drill Ø 2.4 JDPterygo
JDDR101	Drill Ø 2.8 JDPterygo
JDDRPT32	Drill Ø 3.2 JDPterygo


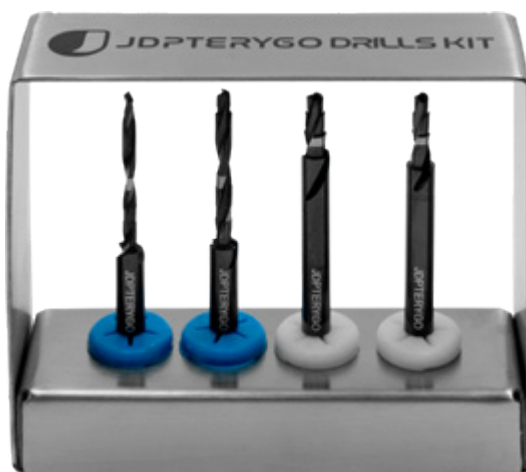


KIT JDNASAL

Maxilla-For-All® Kits

Cod produs: JDNAK / JDNAKF

Kitul JDNasal include burghie special concepute pentru inserția de implante JDNasal. Aceste burghie asigură o osteotomie precisă și rapidă.

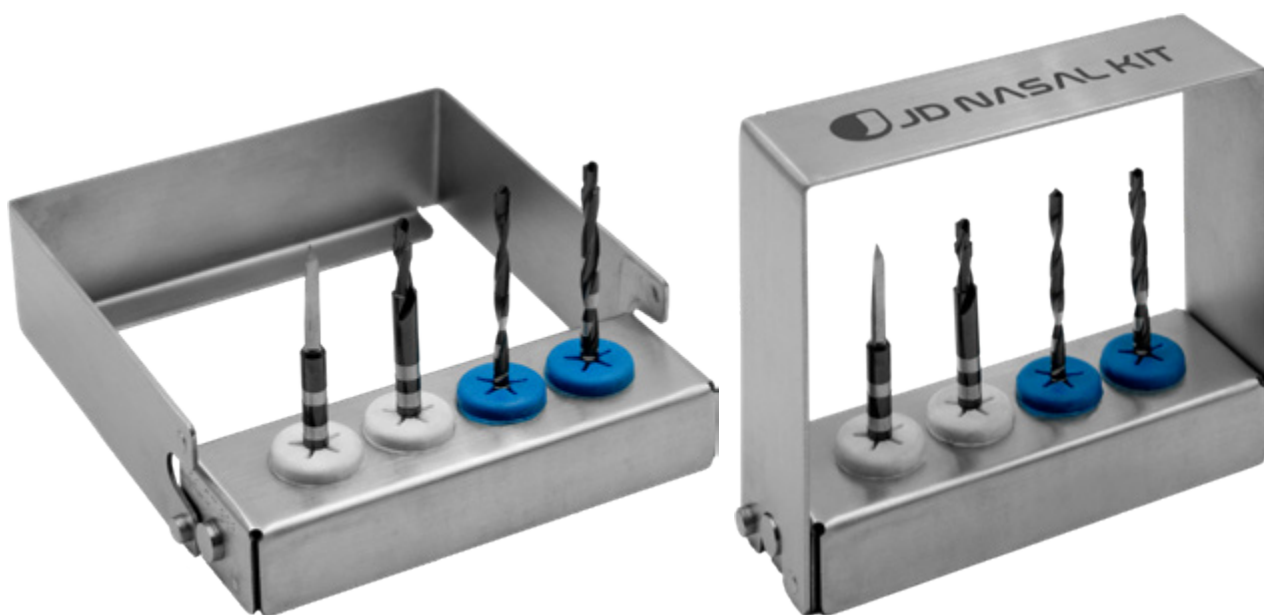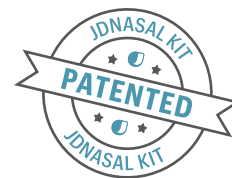

Burghie:

JDIDNA*	Initial Drill JDNasal
JDDR20L	Drill Ø 2.0 JDNasal
JDDR24L	Drill Ø 2.4 JDNasal
JDDRNA24*	Helix Drill Ø 2.4 JDNasal

Dacă ai nevoie de mai multe informații sau detalii suplimentare, spune-mi!




KIT JDZYGOMA

Cod produs: ZSKITE - ZSKITF

Kitul JDZygoma este un kit complet și ușor de utilizat pentru implanturi.




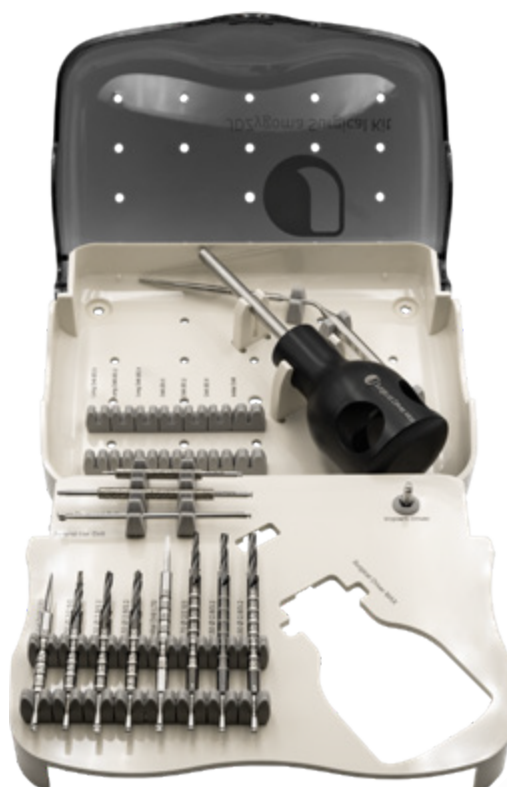

JDZygoma Kit Extra
Cod: ZSKITE

Burghie pentru protocolul necondus:

JDDRZSF28	Round Bur Drill Ø 2.8 JDZygoma
ZJDDREXS150NP	Initial Drill L 50 new profile JDZygoma
ZJDDREXS170NP	Initial Drill L 70 new profile JDZygoma
JDDIADR	Diamond Drill JDZygoma
JDDIADRL	Diamond Drill Long JDZygoma
ZJDDREXS150N	Zygomatic Drill 1 L 50 - 3 Flutes
ZJDDREXS170N	Zygomatic Drill 1 L 70 - 3 Flutes
ZJDDREXS250N	Zygomatic Drill 2 L 50 - 3 Flutes
ZJDDREXS270N	Zygomatic Drill 2 L 70 - 3 Flutes
ZJDDREXS350N	Zygomatic Drill 3 L 50 - 3 Flutes
ZJDDREXS370N	Zygomatic Drill 3 L 70 - 3 Flutes
JDZPR	60mm Depth Probe JDZygoma

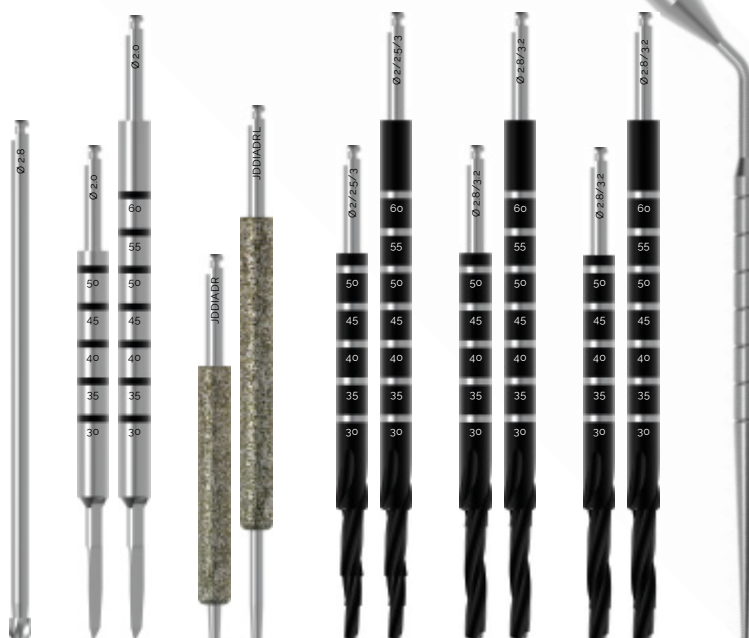


Driver pentru implanturi și protetice:

EVID:	Implant Driver JDEvolution Plus
EVSUDMAX	Surgical Driver Max JDEvolution



KIT JDZYGOMA

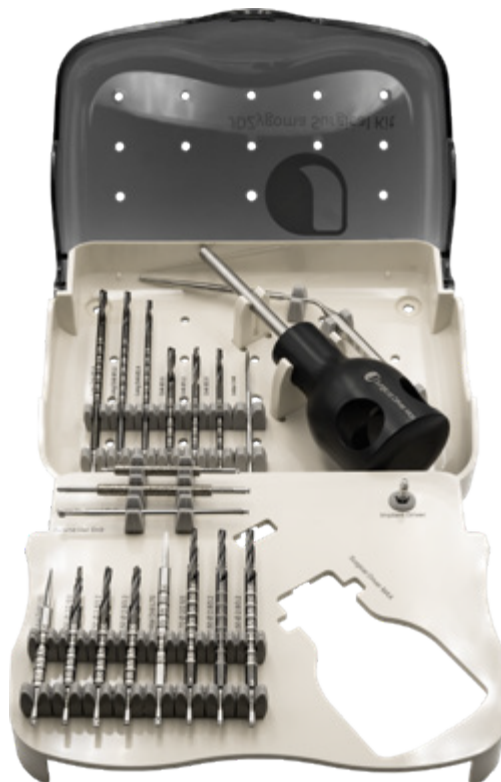


JDZygoma Kit Full
Cod: ZSKITF

Acest kit conține aceleași produse ca și JDZygoma Kit Extra, cu adăugarea următoarelor instrumente.

Burghie pentru protocolul neghidat:

ZJDDRID50	Initial Drill L 50 JDZygoma
ZJDDR28	Drill Ø 2.8 JDZygoma
ZJDDR28L	Long Drill Ø 2.8 JDZygoma
ZJDDR32	Drill Ø 3.2 JDZygoma
ZJDDR32L	Long Drill Ø 3.2 JDZygoma
ZJDDR36	Drill Ø 3.6 JDZygoma
ZJDDR36L	Long Drill Ø 3.6 JDZygoma

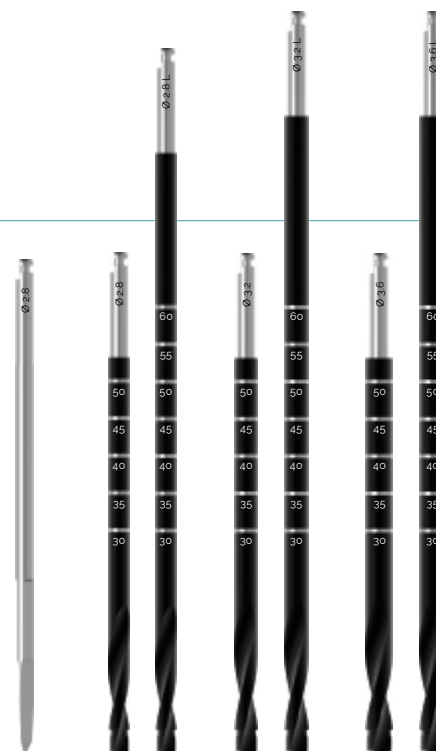


INSTRUMENTE CHIRURGICALE

JDGuide	34
JDTorque	36
Bone Mill	37
Tissue Punch	37
Surgical Drivers	38
Direction Indicators	38
Aligning Instruments	39
Depth Probes	39
JD Removal and Repair Tools	40
JDWeld	42

Cod produs: JDG

JDGuide este un dispozitiv care asigură plasarea corectă a implanturilor, cu o tehnică ușoară, rapidă și precisă pentru a face loc plasării implantului maxilar. JDGuide constă dintr-o bandă de titan care poate fi modelată conform formei arcadelor. Liniile de pe ghidaj ajută la identificarea poziției corecte pentru tăierea osului și designul protezei pentru a efectua o osteotomie mai precisă.

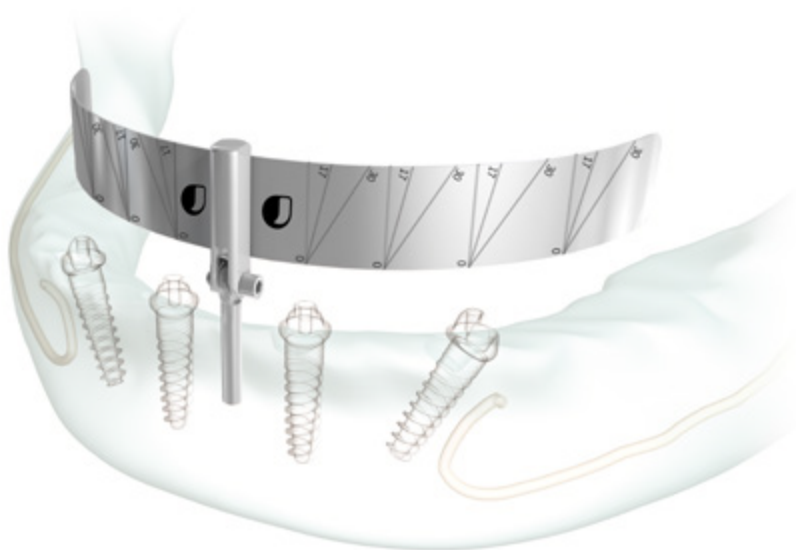


Ghidul este un ghid chirurgical care asistă dentistul în plasarea a patru implanturi pentru a suporta proteze fixe pe întreaga arcadă, încărcate imediat.




Datorită tehnicilor inovatoare de implantologie modernă, sunt necesare doar patru implanturi dentare pentru a reabilita întreaga arcadă dentară a pacienților edentați sau a celor cu dentiție terminală. În aceste cazuri, două implanturi sunt plasate vertical în regiunea anterioară și celelalte două implanturi sunt plasate în regiunea posterioară la o înclinație maximă de 30°. În cazurile de atrofie severă a maxilarului sau mandibulei, implanturile înclinate sunt o alternativă viabilă la grefarea osoasă.

Pacienții edentați sau cei cu dentiție terminală pot fi tratați cu o proteză fixă suportată doar de patru implanturi, două plasate vertical în regiunea anterioară și două plasate până la un unghi de 30° în regiunea posterioară. Utilizarea în mandibulă a implanturilor posterioare înclinate permite obținerea unei ancorări osoase bune fără a interfera cu foramenii mentonieri. În cazurile de resorbție severă a maxilarului, implanturile înclinate sunt o alternativă la augmentarea sinusului maxilar.

JDGuide este plasat într-un osteotom de 2mm care se realizează în poziția mediană a maxilei sau mandibulei. Ghidul ajută și la retragerea limbii în cazurile mandibulare. Liniile de pe Ghid sunt folosite ca referință pentru plasarea implanturilor anterioare paralele și implanturilor posterioare înclinate, ghidând burghiul pentru inserția corectă a implantului. Inclinația maximă indicată pe ghid pentru inserția implantului este de 30°.

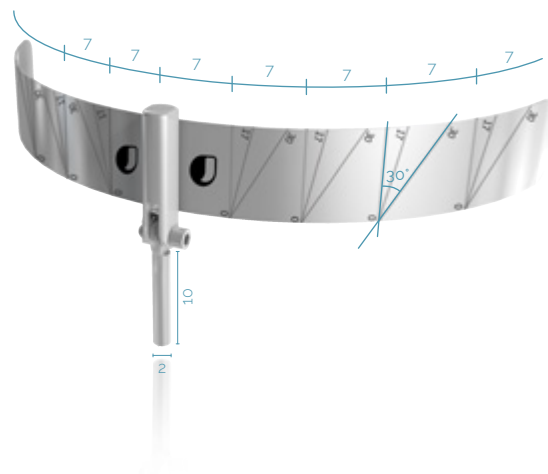

Proceduri clinice pentru mandibulă:

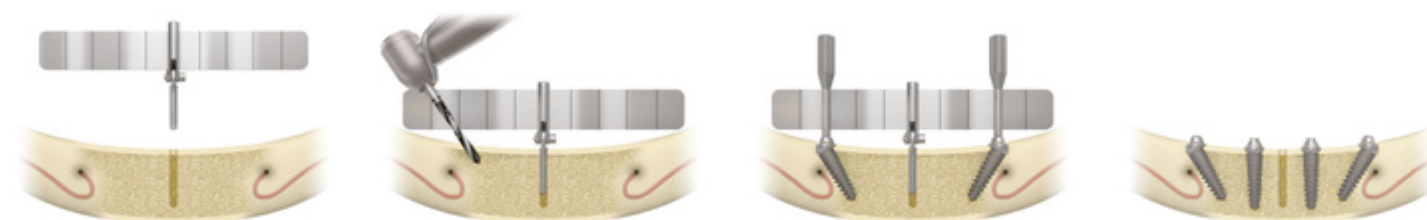

1. Introduceți JDGuide
După realizarea unei incizii pentru flapsul elevat la o adâncime de 10 mm folosind un burghiu de 2mm, plasați JDGuide în osteotom.

2. Pregătiți zona posterioară
Găuriți la adâncimea corespunzătoare folosind un burghiu de 2mm înclinat la un unghi maxim de 30°. Este important să identificați mental foramen. Poziția finală a implantului ar trebui să fie în fața foramenului, evitând bucla nervoasă.

Notă: Dacă este indicat, folosiți Bone Mill cu ghidul Bone Mill pentru a îndepărta osul care poate obstructiona poziționarea corectă a abutmentului. Plasați abutmentul conic la 30°. Executați aceeași procedură la locul opus posterior.

3. Pregătiți locul anterior: Găuriți până la adâncimea adecvată cu o burghiu de 2mm în zona anterioară urmărind liniile verticale ale ghidului JD. Introduceți doi implanturi paraleli în cele două locuri anterioare. Dacă este indicat, folosiți Bone Mill cu ghidul Bone Mill pentru a îndepărta osul care poate obstructiona poziționarea corectă a abutmentului. Plasați abutmentul conic drept.

Proceduri clinice pentru maxilar



Pentru a efectua tratamentul în maxilar, se execută aceleași operații ca cele indicate mai sus pentru pregătirea locurilor de implant în mandibulă, atât pentru zonele posterioare cât și anterioare. Înainte de a începe tratamentul, este important să identificați mai întâi peretele sinusului anterior.

Pentru pregătirea regiunii posterioare a locului, începe pregătirea în zona cea mai îndepărtată, menținând o distanță de aproximativ 4 mm față de peretele sinusului. Pentru pregătirea locurilor înclinate în regiunile posterioare și anterioare, înclină burghiul cât mai mult posibil, fără a depăși 30°, pentru a minimiza depășirea.

JDTORQUE

Cod produs: JDTW

Dispozitivul JDTorque este o cheie manuală de cuplu, fabricată de JDentalCare, utilizată pentru strângerea manuală și la un moment dat măsurarea cuplului. Este capabil să măsoare cuplul până la 80 Nm. Designul, funcționalitatea, practicitatea și greutatea redusă fac acest instrument ușor de utilizat în practica zilnică.



Caracteristicile produsului:

- Măsurarea cuplului de la 15 la 80 Nm
- Adaptabil la toate implanturile și componentele fixe JDentalCare utilizând Adaptorul Prostetic și Adaptorul Chirurgical
- Poate fi utilizat la autosterylizare în autoclave la temperaturi de până la 134°C fără a-i altera caracteristicile
- Pentru o eficiență corectă a instrumentelor chirurgicale, recomandăm un maximum de 20-30 utilizări
- Nu necesită asamblare, economisind timp chiar și în timpul operațiunilor de îngrijire și întreținere

Cheie de cuplu și adaptoare:

JDTW	Torque Wrench JDTorque
JDTWA	Surgical Adapter for JDTorque
JDTWAP	Prosthetic Adapter for JDTorque



Moara de os este utilizată când implantul este inserat la câțiva milimetri sub creasta osoasă și, prin urmare, există dificultăți în îndepărtarea osului. Scopul este de a măcina osul pentru a permite accesul la implant fără a descoperi implantul care va rămâne total în os.

Moară de os:

JDBMNNC	Bone Mill Ø 5.0 and Guide JDEvolution
JDBM6NC	Bone Mill Ø 6.0 and Guide JDEvolution
JDBMGNN	Bone Mill Guide JDEvolution
JDBMNNC:	Bone Mill Ø 5.0 and Guide JDEvolution Plus
JDBM6NC:	Bone Mill Ø 6.0 and Guide JDEvolution Plus
JDBMGNN:	Bone Mill Guide JDEvolution Plus
ESBM5C	Bone Mill Ø 5.0 and Guide JDEvolution S
ESBM6C	Bone Mill Ø 6.0 and Guide JDEvolution S
JDBM3	Bone Mill Guide JDEvolution S
ICBM5C.	Bone Mill Ø 5.0 and Guide JDIcon Plus
ICBM6C.	Bone Mill Ø 6.0 and Guide JDIcon Plus
ICBMG.	Bone Mill Guide JDIcon Plus



PUNCȚIE ȚESUT

Puncționarea țesutului este utilizată pentru a punctiona țesutul moale în poziția în care implantul va fi plasat. Este destinată să fie utilizată pentru tehnica fără lambou.

Puncție țesut:

JDTP30	Tissue Punch Ø 3.0
JDTP35	Tissue Punch Ø 3.5
JDTP42	Tissue Punch Ø 4.2
JDTP50	Tissue Punch Ø 5.0
JDTPG30	Tissue Punch Guide Ø 3.0
JDTPG35	Tissue Punch Guide Ø 3.5
JDTPG42	Tissue Punch Guide Ø 4.2
JDTPG50	Tissue Punch Guide Ø 5.0



DRIVERE CHIRURGICALE

Products Code: EVSUD - EVSUMAX

Driverul chirurgical EVSUD este folosit pentru inserția manuală a implanturilor dentare JDentalCare în fălcile osificate sau mobile în timpul intervențiilor chirurgicale, fiind compatibil cu toate driverii pentru implanturi JDentalCare. Tija este din oțel inoxidabil iar mânerul este negru și anodizat.



Driverul chirurgical EVSUMAX se diferențiază de driverul EVSUD prin designul mânerului care permite o aderență mai mare și este dezvoltat pentru a fi utilizat de către clinicieni la inserarea implanturilor zigomatice.



INDICATORI DE DIRECȚIE

Este posibil să verificați orientarea sau adâncimea implantului în timp ce găuriți folosind indicatorul de direcție. O examinare radiografică ar putea fi necesară pentru a verifica paralelismul cu alte dispozitive adiacente în mod temporar. Aceasta este utilă în cazul în care este necesară corectarea direcției de găurire.

Indicatori de direcție:

JDDI	Direction Indicator
JDDIS	Direction Indicator Short
JDDI17	Direction Indicator 17°
JDDI30	Direction Indicator 30°
JDDI45	Direction Indicator 45°
JDOD32P	Direction Indicator for JDOD32
JDOD37P	Direction Indicator for JDOD37
JDOD43P	Direction Indicator for JDOD43
JDOD50P	Direction Indicator for JDOD50




ALINIAMENTUL INSTRUMENTELOR

Reduceți timpul pentru alegerea abutmentului necesar:

1. Poziționați instrumentul implantului recent inserat
2. Măsurați și alegeți abutmentul corect cu unghiul de înclinare potrivit (7°, 30°, 35°)

Instrumente de aliniament pentru abutmenturi conice:

EVAMT	Conical Abutment Aligning Instrument JDEvolution
ESAMT	Conical Abutment Aligning Instrument JDEvolution S
JDID102	ZAPA Tool
JDID105	Conical Abutment Aligning Instrument JDIcon PLus

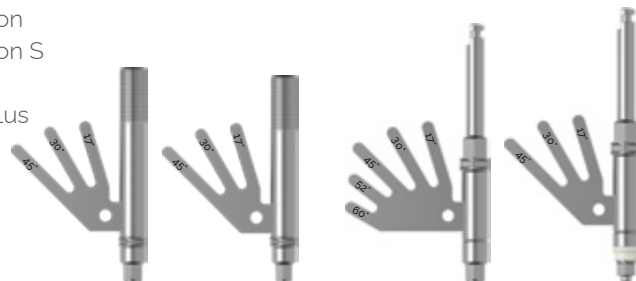

SONDE DE ADÂNCIME

Aceste sonde de adâncime JD sunt concepute pentru a vă ajuta să verificați adâncimea osteotomiei urmărind pas cu pas adâncimea. Ele vă ajută să determinați lungimea corectă a implantului.

Sonde de adâncime:

JDNPR	26 mm Depth Probe JDNasal
JDSPR	Dental Implant Depth Probe
JDZPR	60mm Depth Probe JDZygoma



INSTRUMENTE DE DEMONTARE ȘI REPARAȚIE JD

Instrumentele de Demontare și Reparație JD includ unelte pentru extracția implanturilor, unelte pentru extracția șuruburilor și unelte pentru repararea filetelor interne. EVRIT este instrumentul central dezvoltat pentru extragerea implanturilor în JDentalCare tool collection. Setul de unelte pentru extracția șuruburilor include EVCD, EVEx și EVEX2 și poate fi utilizat pentru a extrage un șurub rupt dintr-un implant cu conexiune hexagonală internă.




Instrument de extracție implant JD

Instrumentul de extracție implant EVRIT poate fi folosit pentru a extrage implanturile în cazul implanturilor vechi sau când capul implantului este deteriorat și nu poate fi extras cu un șurubelniță obișnuită de implant. Instrumentul de extracție implant EVRIT se folosește plasându-se în poziția "OUTER" și rotind pentru a începe operațiunea. Instrumentul de extracție implant EVRIT are un hexagon intern care trebuie combinat cu adaptorul chirurgical JD/TWA.



Unelte pentru extracția șuruburilor JD


Uneltele pentru extracția șuruburilor pot fi utilizate pentru a extrage un șurub rupt dintr-un implant cu conexiune hexagonală internă. Șurubul poate fi combinat cu un cap hexagonal conectând adaptorul la fixture este deteriorat și nu poate fi scos cu șurubelnița protetică. Nu este posibil să extrageți un șurub rupt dintr-un implant dacă nu este înainte degradat printr-o procedură neconvențională. Introduceți dispozitivul de centrare EVCD JD/Evolution în implant și încercați să extrageți șurubul rupt cu ajutorul adaptorului EVEXC montat pe JD/TWA/M manual prosthetic clamp.

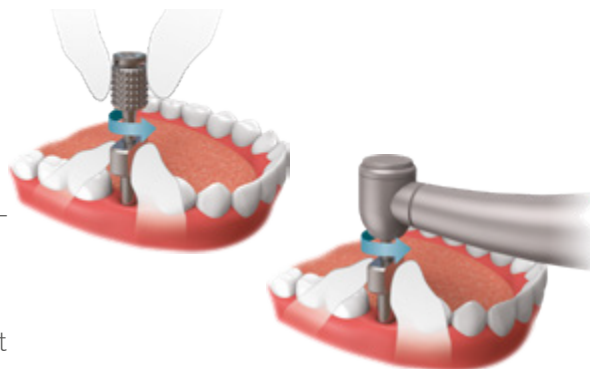

În cazul în care șurubul rupt este blocat, plasați burghiul EVEX Clav Drill în mânerul dispozitivului. Setează rotația în sens invers acelor de ceasornic până la viteza maximă de 600 rpm și începeți să extrageți șurubul rotind mânerul. Îndepărtați burghiul EVEX Clav din mâner și depășiți viteza maximă permisă de 600 rpm în acest proces de extracție cu irigație abundentă. Plasați burghiul EVEX2 Reverse în dispozitivul de centrare EVCD, porniți rotația, țineți-l nu mai mult de trei secunde, eliberați șurubul și scoateți-l. Acest proces va distruge șurubul și este foarte posibil ca EVEX2 să fie supus uzurii sau ruperii. În orice caz, orice fragment sau reziduu poate fi îndepărtat din cavitate cu apă, aer și/sau aspirație.

Instrument de reparare a filetului intern JD

Instrumentul de Reparare a Filetului Intern EVRIT poate fi folosit pentru a repara filetul intern al sistemului în cazul în care este deteriorat. Poate fi folosit cu implanturile JDentalCare montate în adaptorul prostetic JD/TWA/M și, după inserție în implantul deteriorat, este necesar să procedați cu grijă pentru a nu forța sau deteriora filetul intern al implantului. Aceasta înseamnă că trebuie utilizate numai uneltele manuale recomandate, fără a recurge la mânerele cu unghi sau la unghiurile de tăiere.

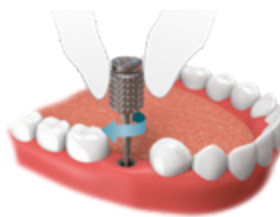

Unelte de demontare și reparație:

EVIRT	Implant removal tool
EVCD	Centering device JDEvolution
EVEX1	Claw drill
EVEX2	Reverse cutting drill
EVTR	Internal thread repair tool JDEvolution



Cod produs:JDW

JDWeld face posibilă crearea unei structuri prin efectuarea unei serii de suduri care unesc substructurile din titan sau conectează restaurările permanente cu încărcare imediată sau întârziată.




Caracteristici:

- Funcții de siguranță: detectare automată a clemelor deschise sau deconectate,
- controlul secvenței de sudură, izolație galvanică de la rețea.
- Meniu în mai multe limbi
- Indicator vizual și semnal acustic de sudură: pași și operațiuni necesare
- pentru a minimiza încălzirea materialului.
- Timp minim de așteptare între sudurile consecutive: îmbunătățirea ratei
- de succes a implanturilor inserate cu stabilitate primară scăzută.
- Gamă largă de ajustare a puterii și setări personalizabile

JDWeld funcționează prin realizarea sudurii prin puncte de rezistență.

JDWeld creează un cadru folosind o serie de suduri care unesc abutmentele la conexiunile de titan. Puterea electrică este concentrată pe punctele de contact dintre firul de titan și abutment, provocând fuziunea titanului într-un timp foarte scurt (în ordinea milisecundelor). Utilizat la implanturile rigide, aceste cadre oferă suport extrem de fiabil pentru restaurările temporare sau durabile la nivelul abutmentului, îmbunătățind semnificativ succesul implanturilor. Sudura la nivelul abutmentului permite realizarea unor impresii extrem de precise ale abutmentului datorită conexiunilor solide care oferă stabilitate și precizie imediată.


Procedura rapidă și simplă este complet sigură pentru chirurg și pacient, fără riscul unei călduri excesive și fără a cauza disconfort.

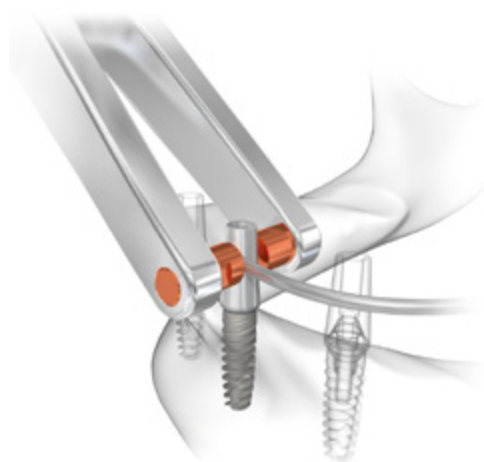**Ghiduri obligatorii:**

- Folosiți doar unitatea JDWeld și componentele și barele dedicate.
- Distanța inter-abutment: mai mică de 8mm, folosiți o bară de 1,5mm peste 8mm și sub 15mm, folosiți o bară de 2mm.
- Centrul abutmentului mai puțin de 14mm de la centrul abutmentului, sudurați o bară dublă (sârmă de 2mm) + virgulă verticală.
- Nu segmentați bara principală - folosiți o singură bucată de sârmă.
- Corectarea poziționării: baza șinei paralelă cu bară.
- În timpul sudurii, eliberați complet clema (nu o deschideți).

Restaurări
temporare
la nivelul
implantului

Restaurări temporare
sau durabile
la nivelul
bontului

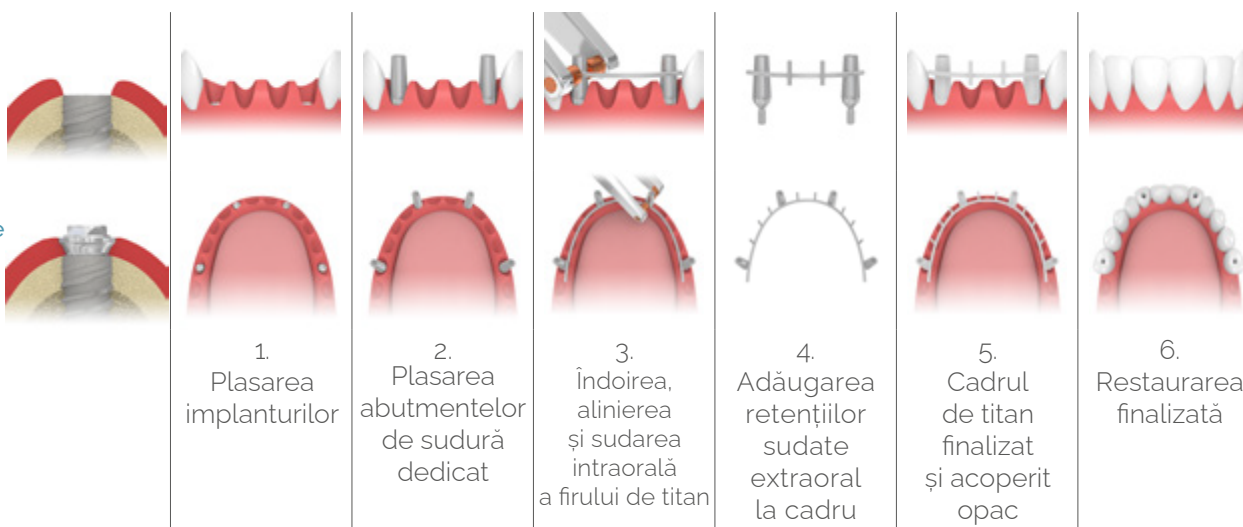**JDWeld și Bare JDWeld:**


JDW	Intraoral Welding JD Weld
JDW12	JDWeld Bar Ø 1.2
JDW15	JDWeld Bar Ø 1.5
JDW20	JDWeld Bar Ø 2.0

**Abutmentele GP:**

EVGPA40NEC	GP Abutment Ø 4.0 Non Engaging JDEvolution
EVGPA50NEC	GP Abutment Ø 5.0 Non Engaging JDEvolution
EVGPA40NEC:	GP Abutment Non Engaging Ø 4.0 JDEvolution Plus
EVGPA50NEC:	GP Abutment Non Engaging Ø 5.0 JDEvolution Plus

**Abutmentele Conice:**

EVCATANEWC	Temporary Abutment Non Engaging Conical Abutment for Welding JDEvolution
EVCATANEWC:	Temporary Abutment Non Engaging Conical Abutment for Welding JDEvolution Plus
EVCATANEWSC	Temporary Abutment Non Engaging Conical Abutment Smooth for Welding JDEvolution
EVCATANEWSC:	Temporary Abutment Non Engaging Conical Abutment Smooth for Welding JDEvolution Plus
EVCAGPANEWC	GP Abutment Non Engaging for Conical Abutment JDEvolution
EVCAGPANEWC:	GP Abutment Non Engaging for Conical Abutment JDEvolution Plus

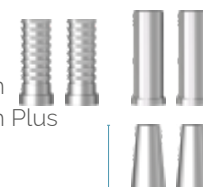

PROTOCOALE DE FORARE:

Chirurgie necondusă	46
Chirurgie condusă	54

CHIRURGIE NEGHIDATĂ

JDEvolution, JDEvolution Plus

	OS VINDECAT		OS POST EXTRAȚIE		
DIAMETRU IMPLANT	OS MOALE	OS MEDIU DENS	OS MOALE	OS MEDIU DENS	
Pregătirea locului în maxilar					
Ø 3.7	2,0 2,4 2,8 up to the 1 laser mark L6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 up to the 1 laser mark L6mm	2,0 2,4 2,8 at the entrance	2,0 2,4 2,8 at the entrance	Implant scurt L 6mm JDEvolution Plus inserție în maxilar
Ø 4,0	2,0 2,4 2,8	2,0 2,4 2,8 3,2 up to the 2 laser mark L 8mm	2,0 2,4 2,8 up to the 2 laser mark L 8mm	2,0 2,4 2,8	
Ø 4,3	2,0 2,4 2,8 3,2 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 up to the 1 laser mark L6-8mm 3,6 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 at the entrance	scurt Ø 4,0 L 6
Ø 5,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 up to the 1 laser mark L 6mm 4,0 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 at the entrance up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 at the entrance up to the 1 laser mark L 6mm	scurt Ø 5,0 L 6
Ø 6,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0	
Pregătirea locului în mandibulă					
Ø 3.7	2,0 2,4 2,8 3,2 up to the 2 laser mark L 8mm 3,6 up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 at the entrance	Implant scurt L 6mm JDEvolution Plus inserție în maxilar
Ø 4,0	2,0 2,4 2,8 3,2 up to the 2 laser mark L 8mm 3,6 up to the 2 laser mark L 8mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 up to the 2 laser mark L 8mm 3,6 up to the 1 laser mark L 8mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 up to the 1 laser mark L 8mm	
Ø 4,3	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 up to the 2 laser mark L 8mm 4,0 up to the 2 laser mark L 8mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 up to the 2 laser mark L 8mm 4,4 up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 at the entrance	scurt Ø 4,0 L 6
Ø 5,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 up to the 2 laser mark L 8mm 4,8 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 at the entrance	scurt Ø 4,3 L 6
Ø 6,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 up to the 2 laser mark L 8mm 4,8 up to the 2 laser mark L 8mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 up to the 2 laser mark L 8mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4	scurt Ø 5,0 L 6



Note: All measurements in mm

JDEvolution S

DIAMETRU IMPLANT	OS MOALE TIP IV	OS MOALE TIP II-III	OS TARE TIP II-III
Ø 3,2	1,5 (2)	2,0 2,4	2,0 2,4 (2,8)

JDIcon, JDIcon Plus

	OS VINDECAT		OS POST EXTRAȚIE		 Implant scurt L 6mm Inserare JDIcon în maxilar
DIAMETRU IMPLANT	OS MOALE	OS MEDIU DENS	OS MOALE	OS MEDIU DENS	
Pregătirea locului în maxilar					
Ø 3.9	2,0 2.4 2,8 up to the 1 laser mark L6mm	2,0 2.4 2,8 3,2 up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2.4 2,8 at the entrance	2,0 2.4 2,8 at the entrance	
Ø 4.3	2,0 2.4 2,8 3,2 at the entrance	2,0 2.4 2,8 3,2 up to the 1 laser mark L 6-8mm 3,6 at the entrance	2,0 2.4 2,8 3,2 at the entrance	2,0 2.4 2,8 3,2 at the entrance	scurt Ø 4.3 L 6Folosiiți burghiu Ø 4mm L6 JDIcon Plus+ JDDICS4
Ø 5.0	2,0 2.4 2,8 3,2 3,6 up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2.4 2,8 3,2 3,6 up to the 1 laser mark L 6mm 4,0 at the entrance	2,0 2.4 2,8 3,2 3,6 at the entrance up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2.4 2,8 3,2 3,6 at the entrance up to the 1 laser mark L 6mm	scurt Ø 5.0 L 6Folosiiți burghiu Ø 4mm L6 JDIcon Plus+ JDDICS4D
Pregătirea locului în mandibulă					 Implant scurt L 6mm Inserare JDIcon în maxilar
Ø 3.9	2,0 2.4 2,8 3,2 up to the 1 laser mark L 8mm 3,6 up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2.4 2,8 3,2 up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2.4 2,8 3,2 at the entrance	2,0 2.4 2,8 3,2 at the entrance	
Ø 4.3	2,0 2.4 2,8 3,2 3,6 up to the 1 laser mark L 8mm 4,0 up to the 1 laser mark L 8mm	2,0 2.4 2,8 3,2 3,6 up to the 1 laser mark L 8mm 4,4 up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2.4 2,8 3,2 3,6 at the entrance	2,0 2.4 2,8 3,2 3,6 at the entrance	
Ø 5.0	2,0 2.4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 up to the 1 laser mark L 8mm 4,8 at the entrance	2,0 2.4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 at the entrance	2,0 2.4 2,8 3,2 3,6 4,0 at the entrance	2,0 2.4 2,8 3,2 3,6 4,0 at the entrance	

JDIcon Ultra S

DIAMETRU IMPLANT	OS MOALE TIP IV	OS MOALE TIP II-III	OS TARE TIP II-III
Ø 2,75	1,5 2,0	2,0 2,4	2,0 2,4 2,8 up to the laser mark

CHIRURGIE NEGHIDATĂ

JDIcon Plus T

	OS LECUIT		OS POST-EXTRACȚIE	
DIAMETRU IMPLANT	OS MOALE	OS DENS MEDIU	OS MOALE	OS DENS MEDIU
Pregătirea locului în maxilar				
Ø 3.5	2,0 2,4 2,8 up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 at the entrance
Ø 4.0	2,0 2,4 2,8 3,2 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 up to the 1 laser mark L 6-8mm 3,6 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 at the entrance
Ø 4.5	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 up to the 1 laser mark L 6mm 4,0 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 at the entrance up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 at the entrance up to the 1 laser mark L 6mm
Ø 5.0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,8 up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,8 up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,8 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 at the entrance 4,8 up to the 1 laser mark L 6mm
Pregătirea locului în mandibulă				
Ø 3.5	2,0 2,4 2,8 3,2 up to the 1 laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 up to the 2 laser mark L 6mm 3,6 up to the 1 laser mark L 8mm	2,0 2,4 2,8	2,0 2,4 2,8 3,2 at the entrance
Ø 4.0	2,0 2,4 2,8 3,2 laser mark L 6mm 3,6 up to the 2 laser mark L 8mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 up to the 2 laser mark L 6mm 4,4 up to the 1 laser mark L 8mm	2,0 2,4 2,8 3,2 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 at the entrance
Ø 4.5	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 at the entrance 4,0 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 at the entrance
Ø 5.0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,8 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,8 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,8 up to the 1 laser mark L 6mm

Note: All measurements in mm


Metoda JD Bone Track

Urmărește metoda BoneTrack, o nouă abordare care va simplifica practica clinică zilnică. Inserează burghiul BoneTrack JD necupant în osteotomia preexistentă și împinge-l direct în os pentru a crea un traseu pe osul palatinal. În acest mod, va fi creat spațiul corect pentru corpul implantului.


DIAMETRU IMPLANT	ÎN MAXILAR	ÎN MANDIBULĂ
Ø 3,2	1,5 2,0 2,4 JD BoneTrack Drill 3,2	1,5 2,0 2,4 2,8 JD BoneTrack Drill 3,2
Ø 3,7	1,5 2,0 2,4 JD BoneTrack Drill 3,7	1,5 2,0 2,4 2,8 JD BoneTrack Drill 3,7
Ø 4,3	1,5 2,0 2,4 2,8 JD BoneTrack Drill 4,3	1,5 2,0 2,4 2,8 3,2 JD BoneTrack Drill 4,3
Ø 5,0	1,5 2,0 2,4 2,8 3,2 JD BoneTrack Drill 5,0	1,5 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 JD BoneTrack Drill 5,0



1. Identificați anatomia alveolei și începeți să perforați către osul palatin.
N.B.: Ultimul diametru standard al burghiului care trebuie utilizat pentru sub-preparare, diametrul osteotomie corespunde întotdeauna cu diametrul vârfului implantului care va fi inserat.

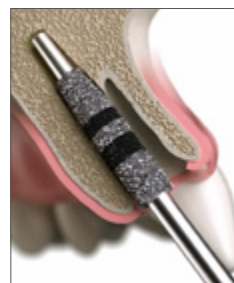

Introduceți vârful necătător al burghiului JD BoneTrack în osteotomie și împingeți burghiul palatinal pentru a crea o traiectorie pe osul palatin.

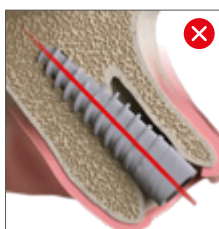

Inserați implantul lăsând spațiul corect vestibular.

JD Onedrill

Viteza recomandată de rotație este de 1200 - 1500 rpm și se obține prin utilizarea soluției fiziologice abundente. Burghiile din kitul JD Onedrill taie eficient, reducând forța necesară pentru avansarea burghiului fără a evacua cioburile de os. Nu pompați burghiile de formare a formei, deoarece aceasta poate distorsiona dimensiunile osteotomie. Burghiul de formare ar trebui avansat până la adâncimea completă, apoi retras fără nicio acțiune de pompare.

DIAMETRU IMPLANT	OS MOALE	OS DUR
Ø 3,2	initial drill 3,2	initial drill 3,2 3,7 until the first laser mark
Ø 3,7	initial drill 3,2 3,7 (optional)	initial drill 3,2 3,7 4,3 until the first laser mark
Ø 4,3	initial drill 3,2 3,7 4,3 (optional)	initial drill 3,2 3,7 4,3 5,0 until the first laser mark
Ø 5,0	initial drill 3,2 3,7 4,3 5,0 (optional)	initial drill 3,2 3,7 4,3 5,0

Important

Când se plasează un implant JDEvolution în osul de tip IV, chirurgul ar trebui să ia în considerare subdimensionarea osteotomie. Diametrul final al burghiului ar trebui limitat la dimensiunea imediat mai mică decât diametrul care ar fi trebuit folosit. Când se plasează un implant JDEvolution în os dur (Tip I), nu trebuie să subpregătiți locul osteotomie. Chirurgul ar trebui să considere utilizarea unui diametru final al burghiului imediat mai mare decât cel care ar fi trebuit folosit, oprindu-se la primul semn laser. Acest lucru va crea o osteotomie de dimensiuni adecvate în osul cortical dens fără subpregătire.

CHIRURGIE NEGHIDATĂ

JDPterygo

Ø 3.3



1.Începeți osteotomia folosind burghiul JDPterygo cu diametrul de 2.0mm, la aceeași lungime a implantului ce va fi inserat.



2.Completați osteotomia cu burghiul JDPterygo cu diametrul de 2.8mm la intrare pentru 6mm.

Ø 4.0



3.Începeți osteotomia folosind burghiul JDPterygo cu diametrul de 2.0mm, la aceeași lungime a implantului ce va fi inserat.



4.Continuați osteotomia folosind burghiul JDPterygo cu diametrul de 2.4mm, la aceeași lungime a implantului ce va fi inserat.



5.Completați osteotomia cu burghiul JDPterygo cu diametrul de 3.2mm, la intrare pentru 6mm.

JDNasal:



1 -JDDR20L



2 -JDNPR



3 -JDDR24L



4 -JDDR28



5 -JDDR32



6 -JDDR36



7 -implant

1.Înțiați pregătirea locului cu burghiul mai lung cu diametrul de 2.0 mm JDNasal pentru a ajunge la osul cortical al nasului.
2. Folosiți sonda de adâncime de 26 mm pentru a verifica adâncimea locului, în scopul de a susține clinicianul în alegerea implantului cu lungimea corespunzătoare.
3. Găuriți până la adâncimea finală cu burghiul JDNasal de 2.4 mm.
4. Continuați osteotomia cu burghiul standard cu torsiune de 2.8 mm la intrare pentru 6 mm.
5. Continuați osteotomia cu burghiul standard cu torsiune de 3.2 mm la intrare pentru 6 mm.
6. Completați osteotomia cu burghiul standard cu torsiune de 3.6 mm la intrare pentru 6 mm. Plasați implantul pentru a atinge poziția finală. Implantul trebuie inserat cu un cuplu între 25 Ncm și 80 Ncm.

instruments used:



JDNasal:



1 -JDDR20



2 -JDDR24



3 -JDDR28



4 -JDDR32



5 -JDIDNA



6 -JDNPR



7 -JDDR24



8 -JDDR36



9A -implant



9B -implant + bone graft

1. Deschideți o fereastră în peretele lateral al sinusului și reflectați cu grijă membrana Schneideriană fără a o perfora. Inițiați pregătirea locului implantului cu burghiul standard cu diametrul de 2.0mm pentru a ajunge și a perfora podeaua sinusului maxilar. Mențineți burghiul înclinat spre dreapta către pilonul canin.

2. Continuați cu burghiul standard cu diametrul de 2.4mm pentru a ajunge și a perfora podeaua sinusului maxilar.

3. Continuați cu burghiul standard cu diametrul de 2.8mm pentru a ajunge și a perfora podeaua sinusului maxilar.

4. Continuați cu burghiul standard cu diametrul de 3.2mm pentru a ajunge și a perfora podeaua sinusului maxilar.

5. Introduceți burghiul inițial JDNasal în canalul creat în os anterior. Burghiați prin procesul alveolar, în sinus și peste sinus, angajând osul nazal în corespondență cu pilonul canin.

6. Utilizați sonda de adâncime de 26mm pentru a verifica adâncimea locului, pentru a sprijini clinicianul în alegerea implantului cu lungimea adecvată.

7. Utilizați burghiul mai lung JDNasal cu diametrul de 2.4mm pentru a burghia ca și cel anterior prin procesul alveolar, în sinus și peste sinus, angajând osul nazal până la adâncimea finală în corespondență cu pilonul canin.

8. Completați osteotomia cu burghiul standard cu diametrul de 3.6mm în procesul alveolar.

9A. Plasați implantul și atingeți poziția finală fără a adăuga grefă de os. Implantul trebuie inserat cu un cuplu de inserție între 25 Ncm și 80 Ncm.

9B. Opțional: plasați implantul, atingeți poziția finală și inserați grefa de os în sinus. Implantul trebuie inserat cu un cuplu de inserție între 25 Ncm și 80 Ncm.

instrumentele
folosite:



CHIRURGIE NEGHIDATĂ


JDZygoma

Există două proceduri pentru a utiliza frezele JDZygoma:


- Prima este Procedura Standard utilizabilă cu setul complet ZSKITF.
- A doua este Procedura Extra Maxilară utilizabilă cu freza cu diametru fix "3 Flutes" prezentă în ambele seturi.

Particularitatea acestor freze constă în dimensiunea diametrului cursului nefuncțional, care rămâne identic de la frezele de diamant la frezele nr.3. Acest lucru se datorează faptului că, odată creată cavitatea de către freza de diamant, aceasta va fi un suport pentru inserarea frezei următoare, care se va fixa perfect pe canal pentru a fi ghidată perfect pe axă.

JDZygoma Ø 3.9mm

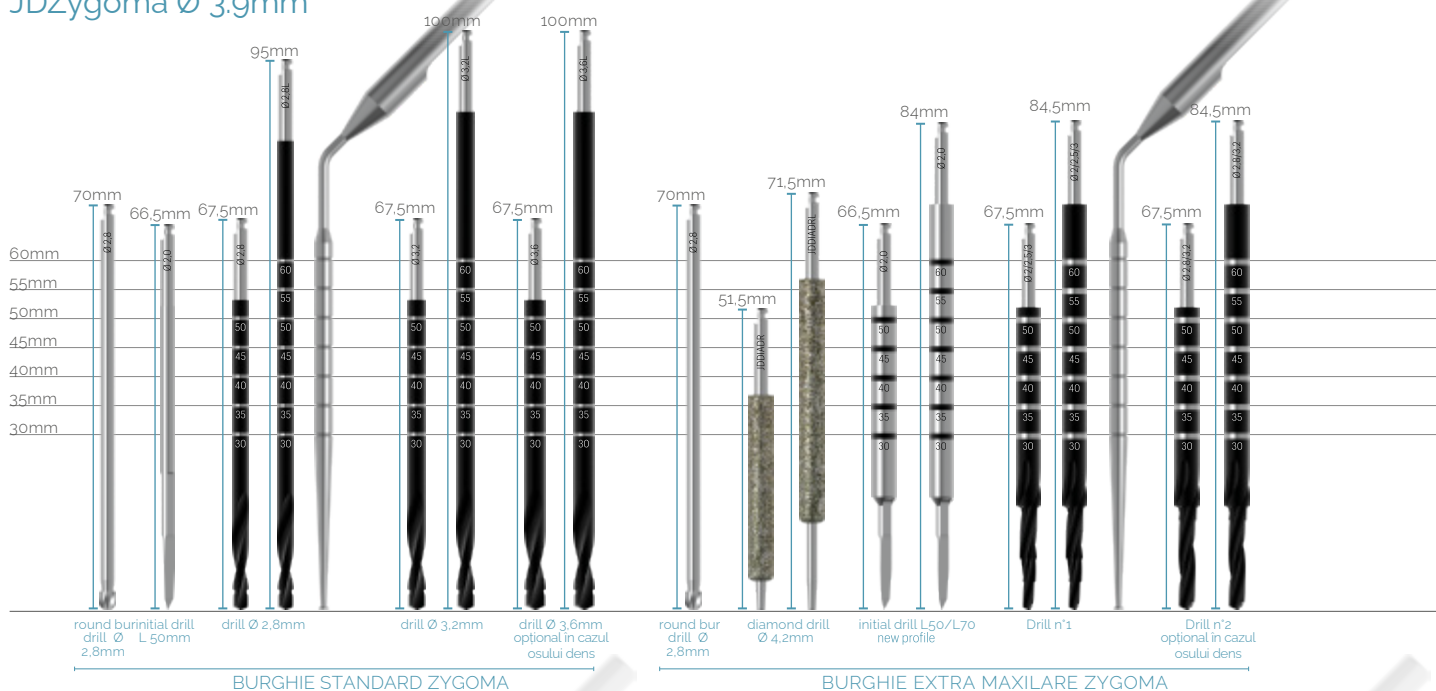

JDZygoma Ø 4.3mm

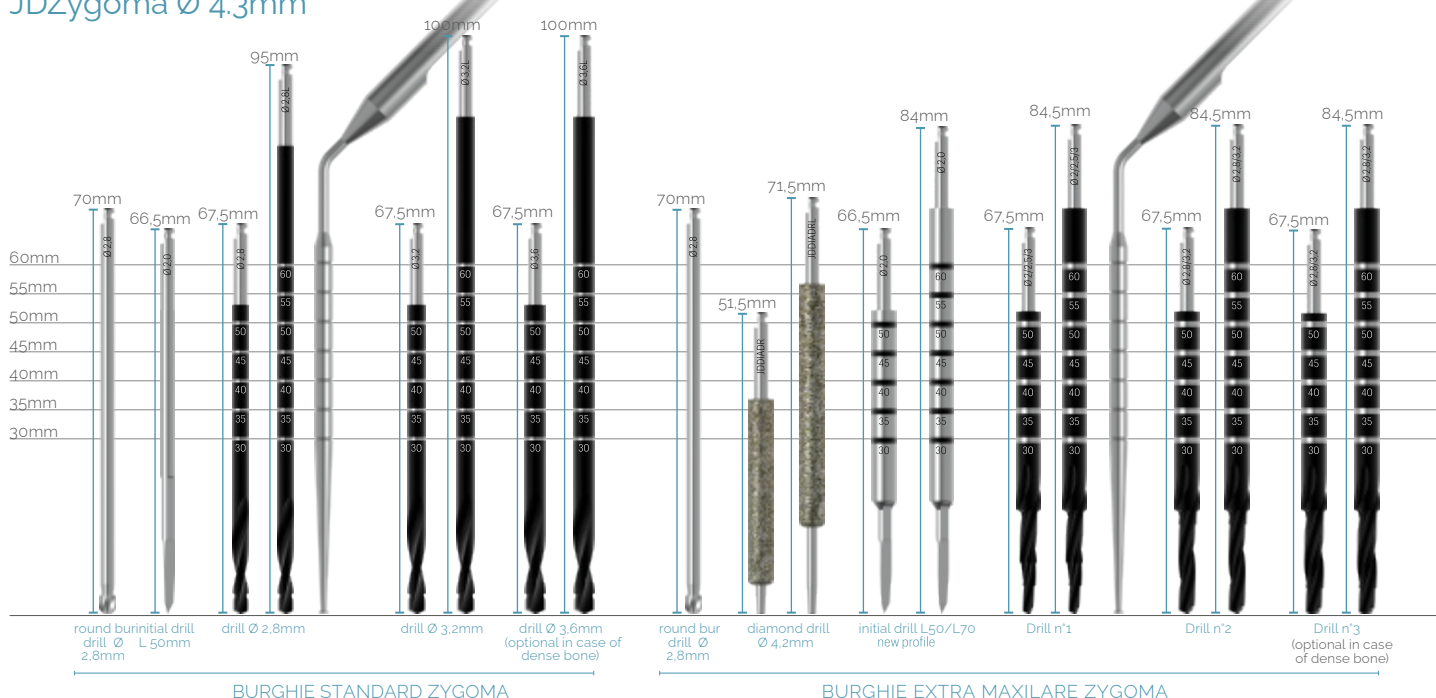

CHIRURGIE GHIDATĂ

Următoarele protocoale de foraj sunt sugerate pentru utilizarea în inserarea implanturilor dentare JDentalCare în cazul tehnicii de Chirurgie Ghidată, folosind instrumentele originale și ghidurile chirurgicale fabricate de JDentalCare. Se recomandă să se respecte indicațiile următoarei secvențe de foraj pentru a asigura stabilitatea primară optimă a implantului.

JDEvolution, JDEvolution Plus, JDIcon, JDIcon Plus, JDIcon Plus T, JDOcta

DIAMETRU IMPLANT	LUNGIME IMPLANT	Pregătirea locului în maxilar		Pregătirea locului în mandibulă	
		OS MOALE	OS MEDIU DENS	OS MOALE	OS MEDIU DENS
Ø 3,7 / 3,9	L6	/	/	/	/
	L8	2,4 L6 - L8 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6 - L8 3,6 L6
	L10	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6
	L11,5	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,6 L6
	L13	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 - L8 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,6 L6
	L15	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 - L8	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6
	L18	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6
Ø 4,0 / 4,3	L6	2,4 L6 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 2,8 L6 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 2,8 L6 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 2,8 L6 3,2 L6 3,6 L6 4,2 L6
	L8	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6 - L8 3,6 L6 - L8 4,2 L6
	L10	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 - L8 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 - L8 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6 - L8 - L10 4,2 L6
	L11,5	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 - L8 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 - L8 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,6 L6 - L8 - L10 - L11,5 4,2 L6
	L13	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 3,6 L6 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,6 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 4,2 L6
	L15	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 4,2 L6
	L18	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,6 L6 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 4,2 L6

Note: All measurements in mm

JDEvolution, JDEvolution Plus, JDIcon, JDIcon Plus, JDIcon Plus T, JDOcta

DIAMETRU IMPLANT	LUNGIME IMPLANT	Pregătirea locului în maxilar		Pregătirea locului în mandibulă	
		OS MOALE	OS MEDIU DENS	OS MOALE	OS MEDIU DENS
Ø 5,0	L6	2,4 L6 2,8 L6 3,2 L6 3,6 L6 4,2 L6	2,4 L6 2,8 L6 3,2 L6 3,6 L6 4,2 L6	2,4 L6 2,8 L6 3,2 L6 3,6 L6 4,2 L6	/
	L8	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6 - L8 3,6 L6 4,2 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6 - L8 3,6 L6 4,2 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6 - L8 3,6 L6 - L8 4,2 L6	/
	L10	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6 - L8 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6 4,2 L6	/
	L11,5	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,6 L6 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,6 L6 - L8 - L10 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,6 L6 - L8 4,2 L6	/
	L13	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,6 L6 - L8 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,6 L6 - L8 - L10 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,6 L6 - L8 - L10 4,2 L6	/
	L15	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6 - L8 - L10 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6 - L8 - L10 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6 - L8 - L10 4,2 L6	/
	L18	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6 - L8 - L10 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6 - L8 - L10 - L11,5 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6 - L8 - L10 - L11,5 4,2 L6	/

CHIRURGUE GHIDATĂ

JDIcon Ultra S

DIAMETRU IMPLANT	LUNGIME IMPLANT	OS MOALE TIP IV	OS MEDIU TIP IV	OS DENS TIP I
Ø 2,75	L6	/	/	/
	L8	2,0 L6 - L8	2,0 L6 - L8 2,4 L6 - L8	2,0 L6 - L8 2,4 L6 - L8 2,8 L6
	L10	2,0 L6 - L8 - L10	2,0 L6 - L8 - L10 2,4 L6 - L8 - L10	2,0 L6 - L8 - L10 2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6
	L11,5	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8
	L13	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8

JDEvolution S

DIAMETRU IMPLANT	LUNGIME IMPLANT	Pregătirea locului în maxilar		Pregătirea locului în mandibulă	
		OS MOALE	OS MEDIU-DENS		
Ø 3,2	L6	/	/	/	/
	L8	2,4 L6 - L8 2,8 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6
	L10	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6
	L11,5	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6
	L13	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6
	L15	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6

JD Pterygo

DIAMETRU IMPLANT	LUNGIME IMPLANT	
Ø 3.3	L13	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,4 L6 2,8 L6 (only for dense bone)
	L15	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,4 L6 2,8 L6 (only for dense bone)
	L18	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,4 L6 2,8 L6 (only for dense bone)
	L20	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 2,4 L6 2,8 L6 (only for dense bone)
Ø 4,0	L13	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6
	L15	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6
	L18	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 3,2 L6
	L20	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 3,2 L6

JD Nasal

DIAMETRU IMPLANT	LUNGIME IMPLANT	
Ø 4,0	L20	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6
	L22	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6
	L24	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 - L24 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 - L24 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6
	L26	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 - L24 - L26 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 - L24 - L26 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6

REZUMAT

Toate burghiile	60
Toate instrumentele	64

TOATE BURGHIILE

BURGHII ȘI KITURI		   					
		EVPS	EVPCN	JDPS	JDPCN	JDBTK	JDODK
		JDPad Surgical Kit	JDPad Surgical Kit w/Drill Stops	JD Surgical Plastic Kit Standard	JD Surgical Plastic Kit w/ Drill Stops	JD Bone Track Kituri Burghie	JD Onedrill Kit
Burghie Helicoidale	JDDR20	●		●			
	JDDR24	●		●			
	JDDR28	●		●			
	JDDR32	●		●			
	JDDR36	●		●			
	JDDR40	●		●			
	JDDR44	●		●			
	JDDR48	■		■			
Burghie Helicoidale cu Opritoare	JDDR20C		●		●		
	JDDR24C		●		●		
	JDDR28C		●		●		
	JDDR32C		●		●		
	JDDR36C		●		●		
	JDDR40C		●		●		
	JDDR44C		●		●		
	JDDR48C		■		■		
Burghie de Precizie	JDPD	●	●	●	●		
	JDGD						
Prelungitor de Burghiu	JDDREXT	●	●	●	●		●
Burghie Diamantate pentru Urmărirea Osului	JDDIADR32					●	
	JDDIADR37					●	
	JDDIADR43					●	
	JDDIADR50					●	
Burghie Ghidate	JDOD32						●
	JDOD37						●
	JDOD43						●
	JDOD50						●
Guided Drills	JDGD20-060						
	JDGD20-080						
	JDGD20-100						
	JDGD20-115						
	JDGD20-130						
	JDGD20-150						
	JDGD20-180						
	JDGD20-200						
	JDGD20-220						
	JDGD20-240						
	JDGD20-260						
	JDGD24-060						
	JDGD24-080						
	JDGD24-100						
	JDGD24-115						
	JDGD24-130						
	JDGD24-150						
	JDGD24-180						
	JDGD24-200						
	JDGD24-220						
	JDGD24-240						
	JDGD24-260						

[illegible]

● Inclus în kit ▲ Furnizat în kit compatibil cu linia de implant aleasă ■ Nu este inclus în kit. Trebuie comandat separat

TOATE BURGHIILE

BURGHIE ȘI KITURI		KITURI STANDART					
							
		EVPS	EVPCN	JDPS	JDPCN	JDBTK	JDODK
		Kit chirurgical JDPad	Kit chirurgical JDPad cu opritori de burghiu	Kit chirurgical plastic JD standard	Kit chirurgical plastic JD cu opritori de burghiu	Kit de burghie pentru urmărirea oaselor JD	Kit JD Onedrill
Burghie Ghidate	JGDG28-060						
	JGDG28-080						
	JGDG28-100						
	JGDG28-115						
	JGDG28-130						
	JGDG28-150						
	JGDG32-060						
	JGDG32-080						
	JGDG32-100						
	JGDG32-115						
	JGDG32-130						
	JGDG32-150						
	JGDG36-060						
	JGDG36-080						
	JGDG36-100						
	JGDG36-115						
	JGDG36-130						
	JGDG36-150						
	JGDG42-060						
	JGDG42-080						
	JGDG42-100						
	JGDG42-115						
	JGDG42-130						
	JGDG42-150						
Burghie JDPterygo	JDDRPT20						
	JDDRPT24						
	JDDR101						
	JDDRPT32						
Burghie Nasal	JDDR20L						
	JDDR24L						
Burghie Helix Nasal	JDDRNA24						
Burghie Diamond	JDDIADR						
	JDDIADRL						
Burghie Inițial	ZJDDRID50						
	ZJDDREXS150NP						
	ZJDDREXS170NP						
	JDID						●
	JDIDNA						
Burghie Round Bur	JDDRZSF28						
Burghie ?JDZygoma	ZJDDR28						
	ZJDDR28L						
	ZJDDR32						
	ZJDDR32L						
	ZJDDR36						
	ZJDDR36L						
Burghie Zygomatic	ZJDDREXS150N						
	ZJDDREXS170N						
	ZJDDREXS250N						
	ZJDDREXS270N						
	ZJDDREXS350N						
	ZJDDREXS370N						

[illegible]

● Inclus în kit ▲ Furnizat în kit compatibil cu linia de implant aleasă ■ Nu este inclus în kit. Trebuie comandat separat

TOATE INSTRUMENTELE

Burghie și Kituri		KITURI STANDART					
							
		EVPS	EVPCN	JDPS	JDPCN	JDBTK	JDODK
		JDPad Surgical Kit	JDPad Surgical Kit w/Drill Stops	JD Surgical Plastic Kit Standard	JD Surgical Plastic Kit w/ Drill Stops	JD Bone Track Drills Kit	JDOnedrill Kit
Driver Implant	EVID	▲	▲	▲	▲		
	EVIDL	▲	▲	▲	▲		
	EVID:	▲	▲	▲	▲		
	EVIDL:	▲	▲	▲	▲		
	ESID	▲	▲	▲	▲		
	ESIDL	▲	▲	▲	▲		
	ICID	▲	▲	▲	▲		
	ICIDL	▲	▲	▲	▲		
	ISID	▲	▲	▲	▲		
	ISIDL	▲	▲	▲	▲		
	ICID.	▲	▲	▲	▲		
	ICIDL.	▲	▲	▲	▲		
	OCID	▲	▲	▲	▲		
	OCIDL	▲	▲	▲	▲		
	OCIDW	▲	▲	▲	▲		
	OCIDLW	▲	▲	▲	▲		
	OCIDN	▲	▲	▲	▲		
	OCIDLN	▲	▲	▲	▲		
	JDIHD	▲	▲	▲	▲		
	JDIHDL	▲	▲	▲	▲		
	JDID30	▲	▲	▲	▲		
	JDID100	▲	▲	▲	▲		
	JDID101	▲	▲	▲	▲		
	JDID116						
	JDID111						
Driver Protetic	EVSDPF15	▲	▲	▲	▲		
	EVSDPF20	▲	▲	▲	▲		
	EVSDPF25	▲	▲	▲	▲		
	EVSDPF35	▲	▲	▲	▲		
	EVSDPF60	▲	▲	▲	▲		
	EVSDPF15:	▲	▲	▲	▲		
	EVSDPF20:	▲	▲	▲	▲		
	EVSDPF25:	▲	▲	▲	▲		
	EVSDPF35:	▲	▲	▲	▲		
	EVSDPF60:	▲	▲	▲	▲		
Corp Driver	EVSDP25						
Probă Adâncă	EVIDG						
	JDZPR						
Indicator Direcție	JDDI	●	●	●	●		
	JDDIS	●	●	●	●		
	JDOD32P						●
	JDOD37P						●
	JDOD43P						●
	JDOD50P						●
Burghie Stop	JDDRST60N		●		●		
	JDDRST80N		●		●		
	JDDRST100N		●		●		
	JDDRST115N		●		●		
	JDDRST130N		●		●		
	JDDRST150N		●		●		

[illegible]

● Inclus în kit ▲ Furnizat în kit compatibil cu linia de implant aleasă ■ Nu este inclus în kit. Trebuie comandat separat

TOATE INSTRUMENTELE

Burghie și Kituri		KITURI STANDART					
							
		EVPS	EVPCN	JDPS	JDPCN	JDBTK	JDODK
		JDPad Surgical Kit	JDPad Surgical Kit w/Drill Stops	JD Surgical Plastic Kit Standard	JD Surgical Plastic Kit w/ Drill Stops	JD Bone Track Drills Kit	JD Onedrill Kit
Pin de fixare	JD PIN						
Perforator de țesut	JDTP35						
Montatori de implant	EVGMC						
	EVGMLC						
	ESGMC						
	ICGMC						
	ICGMC.						
	ICGMLC.						
	ISGMC						
Manșoane	JDBG						
	JDBGB						
	JDBGP						
Șurubelniță chirurgicală	EVSUDMAX						
JDTorque	JDTW	•	•	•	•		
	JDTWA	•	•	•	•		

CHIRURGIE GHIDATĂ		MAXILLA-FOR-ALL®				
						
JDGSK	JDKITo2	JDKITo4	JDKITo1	JDNAKF	ZSKITE	ZSKITF
JD Guided Surgery Kit	JD Extra Drills Kit	JD Pterygo Surgical Kit	JD Pterygo Drills Kit	JDNasal Kit	JDZygoma Kit Extra	JDZygoma Kit Full
●						
●						
▲						
▲						
▲						
▲						
▲						
▲						
■						
■						
■						
					●	●
●						
●						

● Inclus în kit

▲ Furnizat în kit compatibil cu linia de implant aleasă

■ Nu este inclus în kit. Trebuie comandat separat



JDENTALCARE

www.jdentalcare.com



REPREZENTANT AUTORIZAT JDENTALCARE ROMANIA

S.C TOPDENT TECHNIC SRL / CUI : 43646472

BUCURESTI , STR.BARBU VACARESCU 162

EMAIL : CONTACT@ALLONX.RO

CONTACT : +4074492166

WEB : WWW.JDENTALCARE.RO

E-SHOP : WWW.ALLONX.RO